



HELMUT ZEPF
MEDIZINTECHNIK GMBH

Benex[®] III

歯周組織への侵襲を抑える新感覚の抜歯器具



ZEPF | *dental*
newsticker

Forest-one


残根抜歯を、もっとシンプルに。

ワイヤーで残根を直接牽引し、低侵襲での抜歯を実現。
治癒と審美性に配慮した、新しい抜歯アプローチ。




侵襲を抑えた、残根抜歯器具

残根を歯軸方向に引き上げる(脱臼させる)ことにより、抜歯窩の骨壁・歯根膜への侵襲を抑え、抜歯後の治療に良い影響をもたらします。

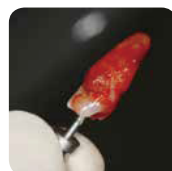

○写真の装置はBenex® IIです

写真提供：月星 光博先生

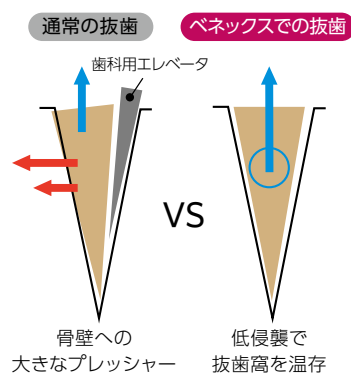

特に有効な症例

- 歯冠崩壊(残根)の抜歯
- インプラントの即時埋入時の抜歯
- Ridge Preservation時の抜歯
- 審美性を求める、特に前歯の抜歯
- 歯根破折の抜歯
- 矯正時の便宜抜歯
- ヘーベルや鉗子等の器具の使用が困難な時
- 骨壁の薄い歯牙の抜歯
- 歯牙移植や再植時の抜歯
- ヘミセクション…など



○写真の装置はBenex® IIです


写真提供：鳥潟 隆睦先生

Changes Benex® II から III への変更点

01

レバー付でワイヤーの ロックが可能に

レバーを倒すことでワイヤーをロックすることが可能になりました。施術中にワイヤーが外れるというストレスを軽減し、よりスムーズな操作を実現しました。

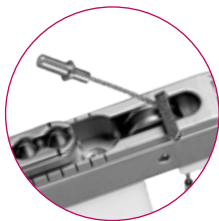


02

先端がスリムに

スリムな先端で、口腔内へのアクセス性が向上しました。付属のサポートトレーと併用することで、歯軸方向に沿ったスムーズな牽引が可能になります。



Benex® II

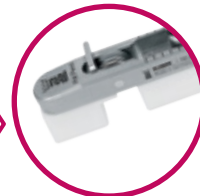


Benex® III

03

ワイヤー固定部に 目盛を追加

歯根の挺出距離を確認しながら操作可能になりました。

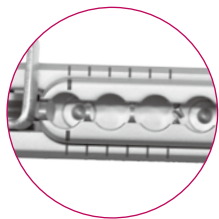

04

過負荷を自動検知し、 安全に動作を停止


オプションでトルクコントロールギアを追加可能です。設定以上の力が加わるとハンドルが止まり、過剰な力のかけすぎを防いでワイヤー破損などのトラブルリスクを低減します。



トルクコントロールギア

設定以上の力が加わると自動で回転を止め、ワイヤーの切断を防ぎます。

使用例

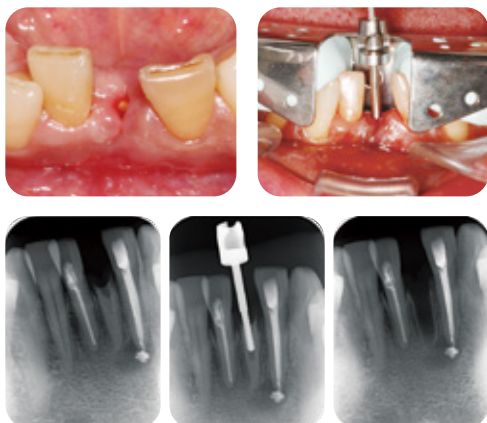

写真提供：鳥潟 隆睦先生

臨床動画公開中

○動画の装置はBenex® IIです


以下のQRもしくは
URLからご視聴いただけます。




https://youtu.be/mgaqQV_27-k?si=RtBU0bnX-MjilnJ0

〈動画提供〉 榊原 亨 先生
榊原歯科クリニック (愛知県)

構成品

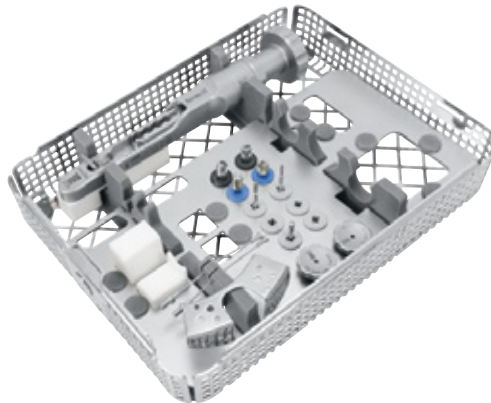

ベネックスⅢ エクストラクター

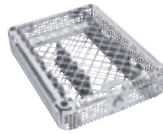


ベネックスⅢ ウォッシュバスケット




Benexサポートトレイ



ベネックスⅢ サポートプレート
18mm(前)

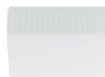

ベネックスⅢ サポートプレート
18mm(後)

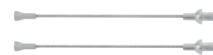

ベネックスⅢ プルワイヤー×2



ベネックスドライバーガイド Short



Benex ドリル 1.6mm×2
Benex ドリル 2.1mm×2



Benexφ1.6mm Short Screw×2
Benexφ2.1mm Short Screw×2



Benexφ1.6mm Long Screw×2
Benexφ2.1mm Long Screw×2

オプション品



ベネックスⅢ トルクコントロールギア



ベネックスドライバーガイド Long

販売名:ベネックス 一般的名称:抜歯用鉗子、手術用ドリル 医療機器分類:一般医療機器 医療機器製造販売届出番号:12B1X10014000012

■お問い合わせ先

Forest-one

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビル4階

TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106 MAIL/info@forest-one.co.jp

<https://www.forest-one.co.jp/>

Forest-one
公式サイト



LINEからも
お問い合わせ
いただけます

