

Forest-one

“機能美”を装う

Selpro

Self-Ligating Bracket

● *A*esthetic

● *S*trength

● *S*afe

● *E*asy



“機能美”を装う

セルフライゲーション・ブラケット

Selpro

耐久性

開閉を繰り返しても
クリップの変形を防ぎ
密着性を維持

キャップ幅の 最大化

キャップ幅を最大化する
ことで、ローテーション
コントロールを向上

高い密着性


クリップの遊びを減らし
ローテーション・トルクの
コントロールを向上

独自の UBH/DBH構造

独自の
UBH/DBH構造により
開閉操作感を向上

ラウンドデザイン

口腔内での接触面を
最小限に抑えた球面フック、
異物感や痛みを軽減する
ラウンドデザインを採用

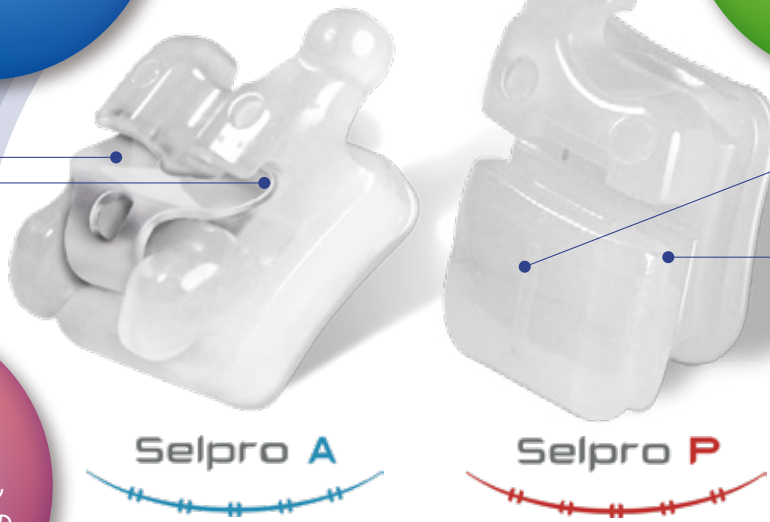

Developer's Comment



〈WBT社との共同開発者〉
Kee-Joon Lee 教授

2種のセラミック製セルフライゲーションの完成はとても嬉しかったです。私たちは市場にある以前のブラケットの限界を克服するために尽力してきました。Selpro Aはクリップのガタつきを軽減し、歯の動きの精密な制御を実現しました。Selpro Pはスロットカバーがブラケット本体を包み込むことで歯のローテーションコントロールを向上させる形状になっています。Selproブラケットシリーズの開発に参加することは貴重な旅でした。これらは患者と歯科矯正医の審美的ニーズと快適さを満たすように設計されていると思います。したがって私の経験に基づいて、望ましい臨床結果を求めているすべての人に、自信を持ってSelproブラケットをお勧めします。

Selproのデザイン


● 曲率の設計

ビッグデータに基づくブラケットベース面の曲率の設計と歯にフィットするデザインが、歯牙へ加わる力を効率化します。




● ベースデザイン

下顎前部の形態歯の形状に合わせたひし形のベースデザイン。隣り合う歯との干渉を防止しブラケット間の距離を確保します。

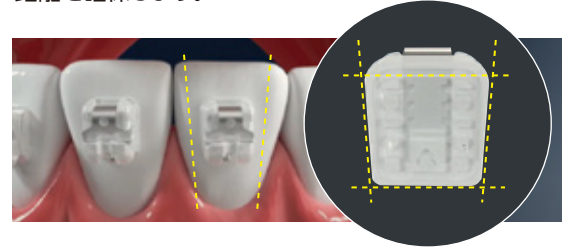




● クリップの遊びを縮小 (Selpro A)

クリップの遊びを減らすことで、ローテーション・トルクコントロールを向上しました。

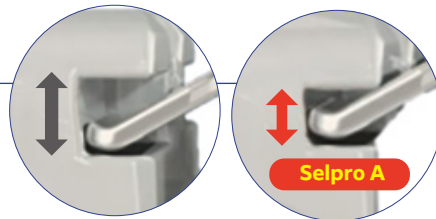

● キャップ幅を最大化 (Selpro P)

キャップ幅を最大化し、より効果的なローテーションコントロールが可能に。

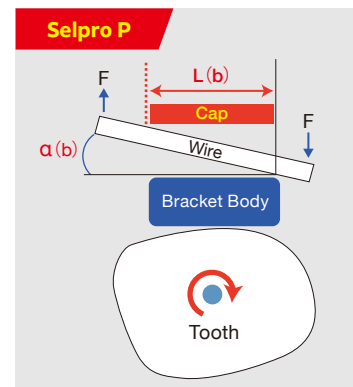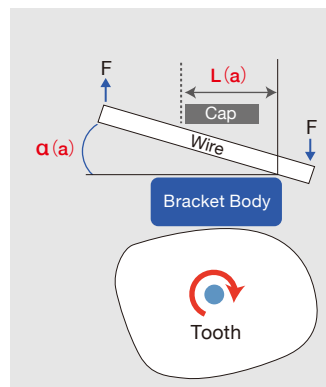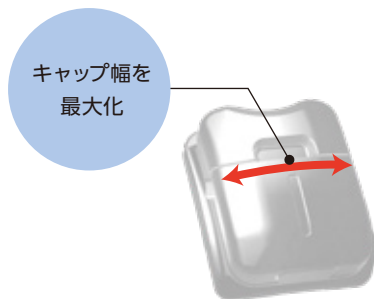


Selproの強度

KCL (Korea Institute of Construction and Living Environment Testing) による試験を実施


● 開閉強度 (Selpro A) 試験番号: CT23-097147K

クリップの開閉を1,000回実施しても形態変化が少なく、ワイヤー交換時のクリップの変形を防止し、また、ワイヤー固定力も継続的に維持します。

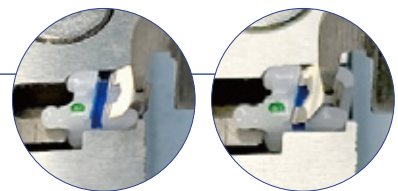

● 脱離強度 (Selpro P) 試験番号: CT21-111006K

ワイヤー荷重に対する耐性を高めたPPC構造の採用により、キャップの脱落強度を向上させました。

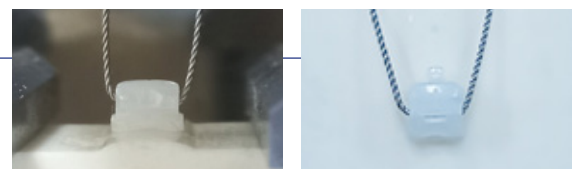

仕様 Specifications

		Tooth	Torque	Ang
上 顎		中切歯	17°	4°
		側切歯	10°	8°
		犬歯 (フック付き)	0°	8°
		第1小臼歯 (フック付き)	-7°	0°
		第2小臼歯 (フック付き)	-7°	0°
下 顎		前歯	-6°	0°
		犬歯 (フック付き)	0°	3°
		第1小臼歯 (フック付き)	-12°	2°
		第2小臼歯 (フック付き)	-17°	2°

MBT
.022

専用ブラケットツール Dedicated Bracket Tool

Opener ○接着剤は、3M ユニテック社製のトランスボンドを推奨しています



Selpro A推奨

Selpro ブラケットツール A CLIP Opener



Selpro P推奨

Selpro ブラケットツール P DOOR Opener

Debonding



Selpro ブラケットツール
Ceramic Bracket Remove Plier

価格表 Price List

○価格は全て標準価格 (税込)

SelproA 1,500円/粒	
上下5-5のセット (20粒)	お問い合わせください
単品 (5粒)	お問い合わせください

SelproP 2,000円/粒	
上下5-5のセット (20粒)	お問い合わせください
単品 (5粒)	お問い合わせください

専用ブラケットツール		
〈Selpro A推奨〉 Selpro ブラケットツール A CLIP Opener		お問い合わせください
〈Selpro P推奨〉 Selpro ブラケットツール P DOOR Opener		お問い合わせください
Selpro ブラケットツール Ceramic Bracket Remove Plier		お問い合わせください

販売名: Selpro ブラケット / 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント / 医療機器分類: 管理医療機器 / 医療機器製造販売認証番号: 306ADBZX00019000

販売名: Selpro ブラケットツール / 一般的名称: 歯科矯正用結さつ器、歯科矯正用プライヤ / 医療機器分類: 一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号: 12B1X10014000079

お問い合わせ先

Forest-one

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階

TEL / 047-474-8105 FAX / 047-474-8106 MAIL / info@forest-one.co.jp



<https://www.forest-one.co.jp>



LINEからも
お問い合わせ
いただけます